

immer-mobil



Elektro-Rollstuhl *immer-mobil*
Faltbar & Leicht
mit Hilfsmittelnummer


Unterwegs und immer mobil sein.

Mit dem **immer-mobil** ist das einfach möglich. Diesen Elektro-Rollstuhl können Sie in nur einer Sekunde zusammenfallen und ganz leicht verstauen. Er ist robust und wendig. Die Lithium-Ionen-Batterien lassen sich bequem im oder auch außerhalb des Gerätes laden. Somit ist er der optimale Begleiter im Alltag. **Dringen und draußen immer mobil sein.**

Alle Vorteile auf einen Blick.

- in nur einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut
- mit Hilfsmittelnummer
- geeignet für Innen- und Außenbereich
- geringer Platzbedarf
- geringes Gewicht (ab 24 kg)
- Lithium-Ionen-Batterien herausnehmbar und leicht zu laden
- 2 Jahre Garantie auf die Batterien
- Reichweite bis 45 km (abhängig vom Modell)
- serienmäßiger Kippschutz
- Steuerung für Links- und Rechtshänder
- auch von Begleitperson steuerbar
- inklusive Fixiergurt für Transport und Aufbewahrung
- umfangreiches Zubehör



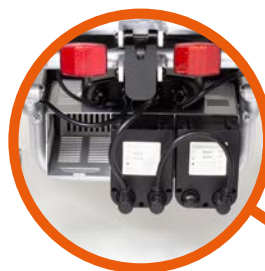

Lithium-Ionen-Batterien
 bis zu 3 Stück;
 (abhängig
 vom Modell),
 herausnehmbar,
 leistungsstark
 und langlebig



Fahrpult
 kann links oder
 rechts montiert
 werden; perfekt
 für Links- und
 Rechtshänder

immer-mobil 140

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0001

**45
km**

Reich-
weite*

**27
kg**

Eigen-
gewicht

**140
kg**

Nutzer-
gewicht



Mit den großen Rädern und der hohen Steigfähigkeit von 25 % überwindet der *immer-mobil 140* komfortabel Rampen, Schwellen, Rillen. Damit ist er der perfekte Wegbegleiter für den Innen- und Außenbereich.

In nur 1 Sekunde leicht & schnell faltbar



mit Hilfsmittelnummer

immer-mobil 145DE

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0005

45
km

Reich-
weite*

30
kg

Eigen-
gewicht

145
kg

Nutzer-
gewicht

Der teilbare *immer-mobil 145DE* kann mit einem Handgriff in zwei Teile mit jeweils einem Gewicht von 16 kg und 14 kg zerlegt werden. Diese sind besonders handlich und machen das Verstauen und den Transport über Stufen oder andere Hindernisse besonders leicht. Technisch entspricht er dem *immer-mobil 140*. Die großen Räder, die kräftige Motorleistung und die damit verbundene hohe Steigfähigkeit machen ihn zu einem verlässlichen und komfortablen Begleiter im Alltag.



Armlehne hochklappbar
ideal für Seiteneinstieg und Transfer



Breite Fußstütze
hochklappbar und höhenverstellbar; zum einfachen Einstieg

16 kg



14 kg



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.

immer-mobil 110

Hilfsmittelnummer 18.46.06.0007

30
km

Reich-
weite*

24
kg

Eigen-
gewicht

110
kg

Nutzer-
gewicht



Das geringe Eigengewicht und die kleinen Räder machen den *immer-mobil 110* besonders wendig und ideal für den Innenbereich.

**Alle Modelle
mit viel
Extra-Zubehör.**

www.immer-mobil.de

immer-mobil 120T

Hilfsmittelnummer 18.46.06.0008

22
km


Reich-
weite*

25
kg

Eigen-
gewicht

120
kg

Nutzer-
gewicht

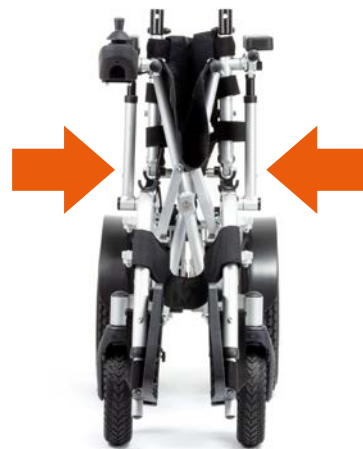

Der Elektro-Rollstuhl *immer-mobil 120T* lässt sich wie ein Standard-Rollstuhl seitlich falten. In gefaltetem Zustand kann er einfach manuell geschoben oder auch elektrisch gefahren und leicht verstaut werden. Die Rückenlehne, die Armlehne und das Fußbrett können an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Technische Daten

	140	145DE	110	120T
Hilfsmittelnummer	18.50.07.0001	18.50.07.0005	18.46.06.0007	18.46.06.0008
Gesamtlänge	106 cm	108 cm	100 cm	103 cm
Gesamtbreite	62 cm	62 cm	59 cm	62 cm
Gesamthöhe	91-111 cm	91-111 cm	95 cm	97 cm
Gesamtgewicht	ab 27 kg*	ab 30 kg*	ab 24 kg*	ab 25 kg*
Sitztiefe	44 cm	44 cm	43 cm	44 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm	44 cm	45 cm
Unterschenkellänge	44/42 cm	45/43 cm	45/43 cm	46/43/40 cm
Sitzhöhe	53 cm	53 cm	52 cm	49 cm
Sitzneigung	4° nach hinten geneigt		1° nach hinten geneigt	
Rückenhöhe	41-59 cm	41-59 cm	43 cm	41 cm
Rückenwinkel (in Grad nach hinten geneigt)	14°	9°	10°	22/13/4° stufenweise einstellbar
Maße gefaltet LxBxH	46 x 62 x 79 cm	46 x 62 x 79 cm	38 x 59 x 72 cm	79 x 36 x 78 cm
Max. Nutzergewicht/ Nutzlast	140 kg	145 kg	110 kg	120 kg
Vorderrad	8 Zoll Luft oder wahlweise PU		8 Zoll PU (grau oder schwarz)	8 Zoll Luft oder wahlweise PU
Hinterrad	12 Zoll Luft oder wahlweise PU		10 Zoll PU (grau oder schwarz)	12 Zoll Luft oder wahlweise PU
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl)	ca. 30 km mit zwei Batterien / ca. 45 km mit optionaler dritter Batterie		ca. 15 km mit einer Batterie / ca. 30 km mit optionaler zweiter Batterie	ca. 11 km mit einer Batterie / ca. 22 km mit optionaler zweiter Batterie
Steigfähigkeit max.	14°/ 25%	14°/ 25%	9°/ 16%	10°/ 18%
Lithium-Ionen Batterien	2 Batterien 24V 10Ah, 3. Batterie optional		1 Batterie 24V 10Ah, 2. Batterie optional	1 Batterie 24V 7,5Ah, 2. Batterie optional
Ladegerät	Eingang: 100-240VAC 50/60Hz, Ausgang: DC + 24V 3A			
Ladezeit	Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10Ah Batterie braucht ein 3A Ladegerät ca. 3,5 Stunden. Für 3 Batterien à 10Ah (gesamt 30Ah) benötigt das 3A Ladegerät somit 10 Stunden und ein 5A Ladegerät 6 Stunden.			
Bürstenlose Elektro-Motoren	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h			
Material Rahmen	Aluminium			
Bremssystem	automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Bremssystem			
Fahrpult links und rechts montierbar	Ja			
Fahrpulthalterung für Begleitperson	optional			
Adapter um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden	optional			
Stockhalter	optional			

* Das Gewicht ist abhängig von der Ausstattung und von der Bereifung.

Der **immer-mobil** ist ein speziell für den deutschen Markt mit seinem Hilfsmittelnummernsystem und den damit verbundenen spezifischen Prüfungen und Anforderungen, hergestelltes Gerät.

Ihr Fachhändler:



Mehr dazu auf:
www.immer-mobil.de